



Silla Terapéutica y dispositivos de juegos sensoriales e interactivos.

Puede verse un vídeo
complementario en

http://youtu.be/X_WHxoT11Yg



Silla Terapéutica y dispositivos de juegos sensoriales e interactivos.

Breve descripción

La silla terapéutica es adaptada con 3 mesas o tablas terapéuticas. Una de ellas facilita los procesos de alimentación y las otras 2 favorecen y apoyan el tratamiento terapéutico para la rehabilitación de muñeca y mano (miembro superior) por medio de las actividades allí propuestas a través de las herramientas y materiales adaptados.

Para quién se hizo y con qué objeto

Va dirigida a niños y niñas entre los 6 y 12 años de edad que presentan lesiones del sistema nervioso.

El propósito es facilitar la intervención terapéutica de los niños(as) con lesiones neurológicas que requieren habilitación o rehabilitación del miembro superior. Esta consta de 1 mesa para la alimentación y 2 mesas terapéuticas, las cuáles a su vez tienen una serie de herramientas y materiales que favorecen el desarrollo de actividades que estimulan la motricidad fina y gruesa de la mano.

Materiales y modo de funcionamiento

Madera,
PVC,
espuma rosada y naranja,
cinturones en poliéster de algodón y licrado,
granos de arroz, hilo grueso,

Proceso de elaboración

goma,
icopor y
plástico

La adaptación se hace a una silla de comedor para bebé, la cual debe tener una altura de 91cm.

Se elaboran los soportes laterales en madera de 60cm de ancho x 38 cm de largo y el soporte de cabeza se elabora de 36cm de ancho por 10cm de largo y un grosor de 7cm.

El espaldar debe ajustarse a una altura de 44cm x 44cm de ancho.

A nivel del tronco lleva 2 cinturones en poliéster de algodón sujetadas al espaldar, a fin de mantener el enderezamiento postural; los reposabrazos deben ser graduables.

A nivel de las piernas lleva una base cuadrada en PVC forrada en espuma, a fin de ubicar la musculatura del miembro inferior, a éste nivel también se adaptan 2 cinturones en poliéster a la altura de la rodilla.

La silla tiene apoya pies.

Las mesas son construidas de acuerdo al número de actividades a involucrar y requeridas para la rehabilitación de MMSS a nivel de muñeca y mano.

Precauciones

La única precaución a tener en cuenta es la postura asumida por el niño(a), la cual debe proporcionar comodidad y un posicionamiento adecuado.

Autores y datos de contacto

Apellidos: Bautista Flórez

Nombre: Carmen Helena

Dirección: Calle de los estudiantes 10-20 Ciudadela
Real de Minas

Código Postal : 680005


Ciudad: Bucaramanga

País: Colombia

Teléfono: 6525*** ext.7226

Correo electrónico: carmen.bautista@virtualumb.com

Galería de imágenes

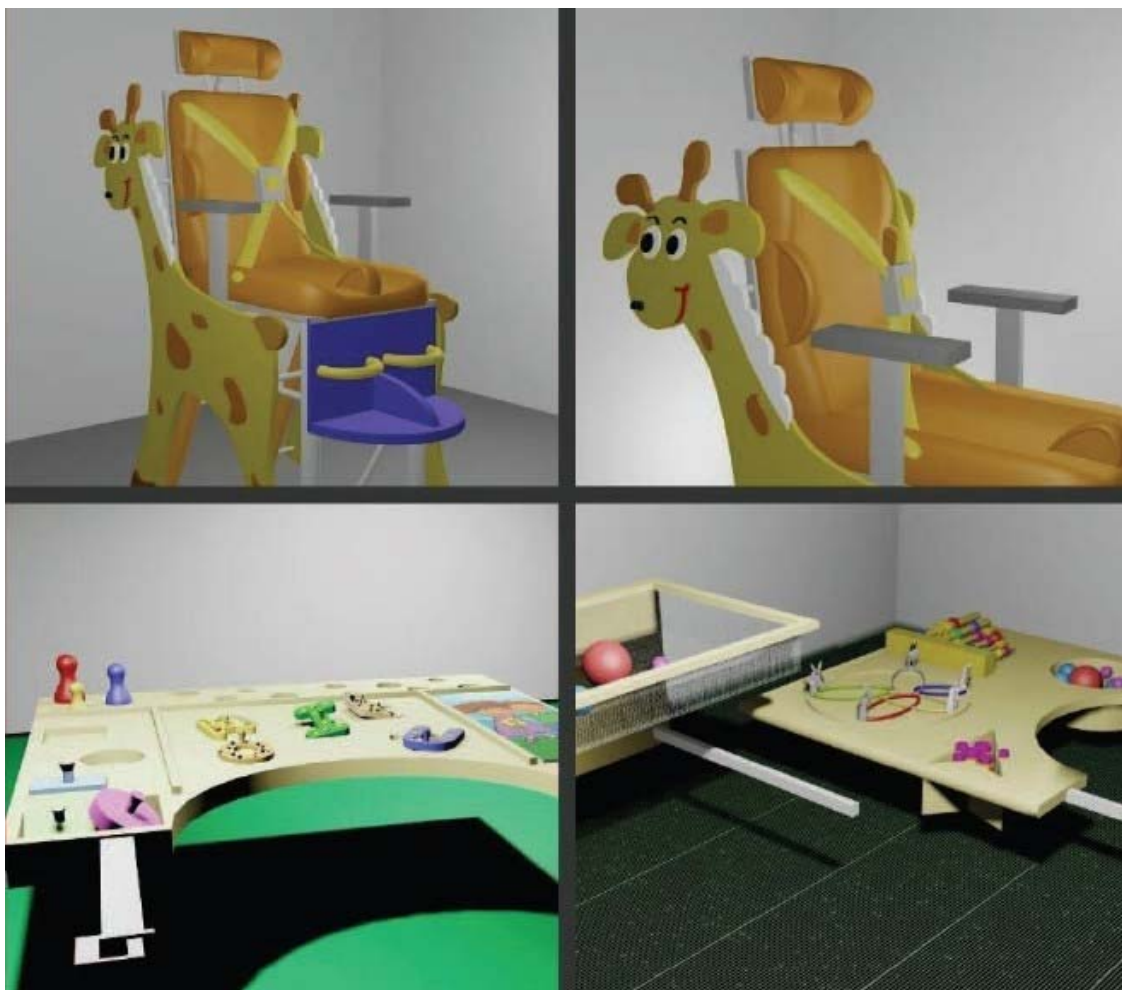

Vista de la silla terapéutica y de la mesa con los distintos dispositivos de juego y sensoriales.