



Soporte  
anterior  
de la cabeza.



## Soporte anterior de la cabeza

### Breve descripción

Modificación de una pantalla facial de jardinería para su uso como soporte anterior de cabeza.

### Para quién se hizo y con qué objeto

Se realizó para una persona con Daño Medular por Artrosis Cervical y Esclerosis Lateral Amiotrófica.

El fin era poder controlar la posición de la cabeza en determinados momentos que la fatiga le impide el mantenimiento de la extensión de cuello.

### Materiales y modo de funcionamiento

Los materiales necesarios son:

- Pantalla facial de seguridad para jardinería que consta de dos partes: una parte anterior para la protección de la cara y una parte superior para ajustarla al contorno de la cabeza.
- Venda elástica de crepé.
- Esparadrapo.
- Cordón de goma.

*\*Es necesario que el usuario lleve instalado en su silla de ruedas un reposacabezas posterior.*

### Proceso de elaboración

1. Se desmonta la parte anterior de la pantalla facial. Esta parte anterior está formada por una parte móvil a la cual está unida una parte fija transparente.

2. Se prescinde de la parte fija.
3. La parte móvil se monta de nuevo, en la zona de acople regulable, pero al revés, hacia la parte posterior de la cabeza.
4. La parte anterior de la pieza ajustable a la cabeza debe acolcharse para dar confort al usuario y que no tenga ningún tipo de roce. Se puede realizar con venda elástica y esparadrapo.
5. Se utiliza el cordón de goma elástico para unir la parte posterior del producto (la parte que se había colocado al revés) bien al reposacabezas previo de la silla bien a alguna parte fija del soporte del mismo.

## Precauciones

Observar que no roza ninguna parte del producto en la cabeza del usuario y si esto ocurre hay que aflojar las partes móviles y/o colocarle alguna protección.

## Autores y datos de contacto

**Apellidos:** Matas López

**Nombre:** M<sup>a</sup> Esther

**Dirección:** C.R.M.F.- IMSERSO Avda. Villamayor 79

**Código Postal :** 37007

**Ciudad:** Salamanca


**País:** España

**Teléfono:** 923 23 48 50

**Fax:** 923 12 18 92

**Correo electrónico :** esthermatas@imserso.es

## Galería de imágenes

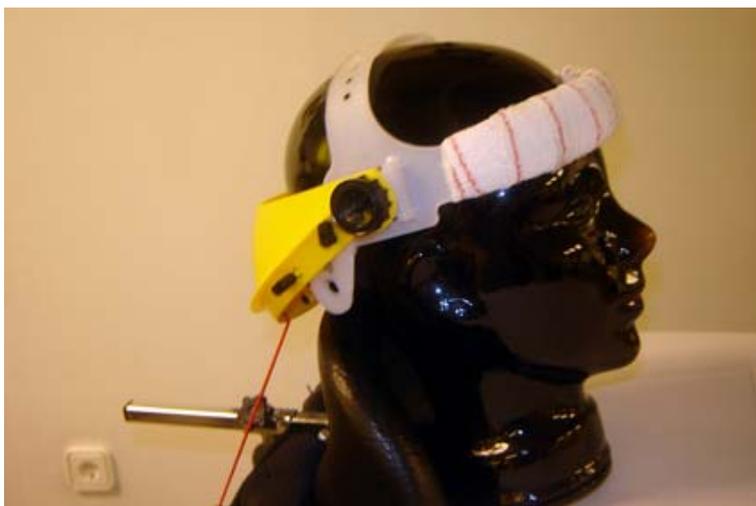

Vista lateral de la adaptación acabada



Vista ampliada del ajuste a la cabeza.